

Verbessern Sie die Sicherheit bei der Abgabe von Medikamenten mit dem Medikamentenschrank HSD





Sorge der m

*Das von dem französischen Hersteller
Sextant Medical entwickelte HSD-System
bietet eine umfassende Lösung, um den
Umlauf und die Ausgabe von Medikamenten
im Krankenhausbereich sicherer zu gestalten.*



Ein komplettes Verwaltungs- system

Der über ein EDV-System gesteuerte Medikamentenschrank HSD ermöglicht dem Pharmazeut eine genaue Kontrolle des Lagerbestands und aller Ausgabevorgänge der Medikamente. Dieses Hilfsmittel ist unentbehrlich für alle Pflegestationen, die sich verpflichtet haben, Medikamente richtig einzusetzen.

Sichere Lagerung

Dank der speziellen Ergonomie, die eine perfekte Ordnung gewährleistet, und dem in Echtzeit arbeitenden EDV-System vereinfacht der Schrank HSD die Vorgänge des Auslagerns und Nachfüllens von Medikamenten und sorgt für größere Sicherheit. Ein System, das die Rückverfolgbarkeit der Auslagerung garantiert, warnt den Bediener, wenn beim Auslagern ein Fehler auftritt. Durch die Programme kann zudem verhindert werden, dass ein Medikament ausgeht und der Apotheken-Notdienst gerufen werden muss. Der Medikamentenschrank HSD unterstützt gängige Protokolle (HL7, ASTM, HPRIM (XML), PN13, etc.) und kann an Geräte zur automatischen Vorbereitung von Bestellungen angeschlossen werden, so dass die komplette Automatisierung dieses Vorgangs ermöglicht wird.

en Sie für mehr Sicherheit bei medikamentösen Behandlung



Die Ausgabe: Steuern und kontrollieren

Über die einfache und leicht zu bedienende Benutzeroberfläche kann sich das Pflegepersonal anmelden und alle Arbeitsvorgänge durchführen. Sie werden dabei komplett von einem System geleitet, welches Schubladen gezielt freigibt und mittels Beleuchtung den genauen Lagerort der gesuchten Produkte für die Ein- oder Auslagerung signalisiert. Zugriffsfehler werden erkannt, angezeigt und gespeichert.

Sensibilisieren und Verantwortungsgefühl wecken

Neben der Erstellung von sehr nützlichen Statistiken für die leitenden Pharmazeuten und/oder verantwortlichen Krankenpfleger bietet das HSD-System auch die Möglichkeit, den Anwendern spezifische Informationen zu den einzelnen Produkten oder zur deren Sicherheit zukommen zu lassen.

Jedem Lagerort ist ein Sicherheitsniveau (Basis, Mittel oder Hoch) zugeordnet, welches den Bediener bei einem Alarm auffordert, die dem Sicherheitsniveau entsprechenden Überprüfungen vorzunehmen.

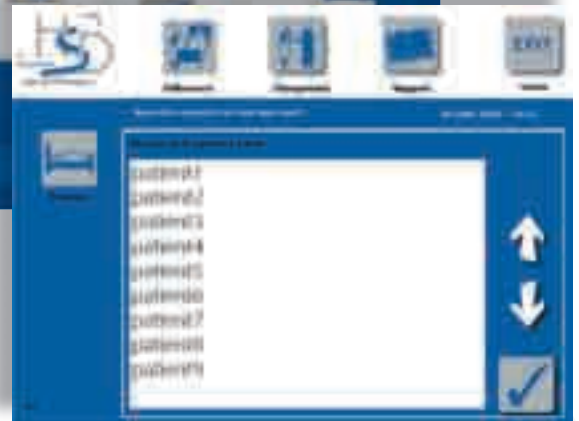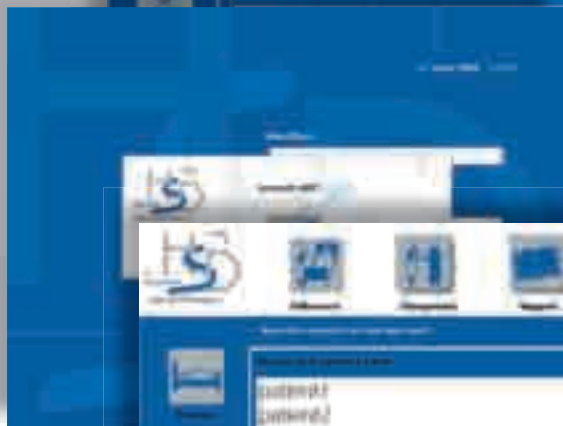

Ein Maximum an Leistungen für ein Minimum an Kosten

- Großes Fassungsvermögen: bis zu 48 Fächer pro Schublade und 10 Schubladen
- Geringste Lagerkosten pro Produkttyp
- Ergonomie der Benutzeroberfläche für die Ausgabe
- Schnittstelle HL7-V3 kompatibel
- Optimale Lagerverwaltung
- Online-Kontrolle des Lagerbestands in Echtzeit
- Rückverfolgbarkeit der Produkte bei der Auffüllung
- Rückverfolgbarkeit der Produkte bei der Ausgabe

Sonderausstattung:

- Schubladen für Medizinprodukte
- Zugangskontrolle und Lagerung von zu kühlenden Produkten

Der HSD ist heute das wettbewerbsfähigste Produkt auf dem Markt der computergesteuerten Schränke - zuverlässig, leistungsfähig und einfach zu bedienen. Dank seines innovativen Ausgabesystems bietet der Schrank HSD ein unübertroffen hohes Sicherheitsniveau zu geringsten Kosten.



NEU
In Frankreich
hergestellt

MACH⁴
Automatisierungstechnik GmbH

Limbeckstrasse 63-65 • D-44489 BOCHUM
Tel: **+49(0)234.58834-20** • Fax: +49(0)234.58834-37
www.medimat.de

IMAGIN Abbildungen unverbindlich.



Sextant Medical
High Security Dispenser

23 rue de la Forêt • Bât 4 • 67550 VENDENHEIM • Tél. **+33 (0)3 88 39 59 89** • Fax +33 (0)3 88 59 44 40
www.sextantmedical.fr